

ニューモボックス®NPシリンジの 使用方法

2歳未満接種不可

ニューモボックス®NPシリンジ
肺炎球菌ワクチン



1 冷蔵庫から取り出し、 室温に戻してから使用します。


- 誤って凍結させたものは品質が変化しているおそれがあるので使用しないでください。
- ワクチン名、製造番号、最終有効年月日を確認してください。
- 最終有効年月日が過ぎたものは使用しないでください。

2 予防接種の注射針を用意します。

- 注射針は添付されていません。
- 被接種者の年齢や体型を考慮し、適切な注射針を選んでください。

3 包装箱からシリンジを取り出し、 プランジャー（押子、内筒）が 緩んでいないか確認します。

- プランジャーとガスケットの接合は、ねじ込み式のため、取り扱い時に接続が緩むおそれがあります。
- 緩んでいる場合には、キャップを押さえ、プランジャーを時計回りに回転させてガスケットにねじ込み、しっかり固定してください。
- 緩んでいる場合でも、しっかり固定することにより安全にご使用いただけます。

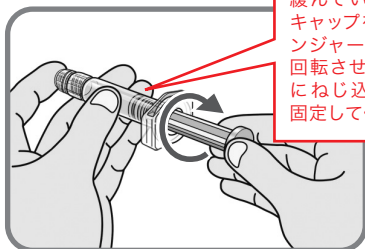

緩んでいる場合には、
キャップを押さえ、プラン
ジャーを時計回りに
回転させてガスケット
にねじ込み、しっかり
固定してください。


4 異常がないかを確認します。

- 異常な混濁、着色、異物の混入などが認められた場合は使用しないでください。

5 シリンジのキャップを外し、 用意した注射針を時計回りに ねじ込み、しっかり固定します。

- シリンジ本体を持って、先端部にあるキャップを時計と反対回りにねじって外します。その際、シリンジ先端に触れないでください。
 - 次に、ルアーロックアダプターをしっかり保持したまま、注射針を時計回りに回転させてねじ込み、しっかり固定してください。
- ※ルアーロックアダプターを保持せず注射針を回転させた場合、ルアーロックアダプターが注射針と共に回転し、しっかり固定できないおそれがあります。
- ※注射針の取り付けが強すぎたり、弱すぎると、針基が割れたり、シリンジ先端と針基に隙間が生じて液漏れを引き起こすおそれがあります。

シリンジ先端に触れ
ないでください。

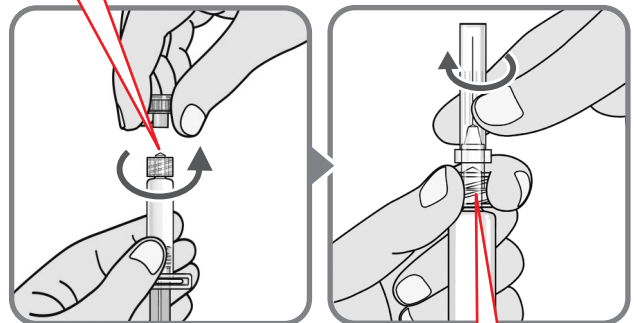

注射針は、ルアーロック
アダプターを保持しな
がら固定してください。

6 注射針キャップを外し、 全量を注射します。

- シリンジ内の気泡を除去する場合には、注射液を減じないように注意してください。
- 本剤は皮下又は筋肉内に注射してください。

7 使い終わったら、医療廃棄物と して適切に廃棄します。

- シリンジ及び注射針は、医療廃棄物扱いです。

製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961
<受付時間> 9:00~17:30 (土日祝日・当社休日を除く)



製造販売元 [資料請求先]

MSD株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北1-13-12 北の丸スクエア
<http://www.msd.co.jp/>

2020年6月作成
PMV20PH0017